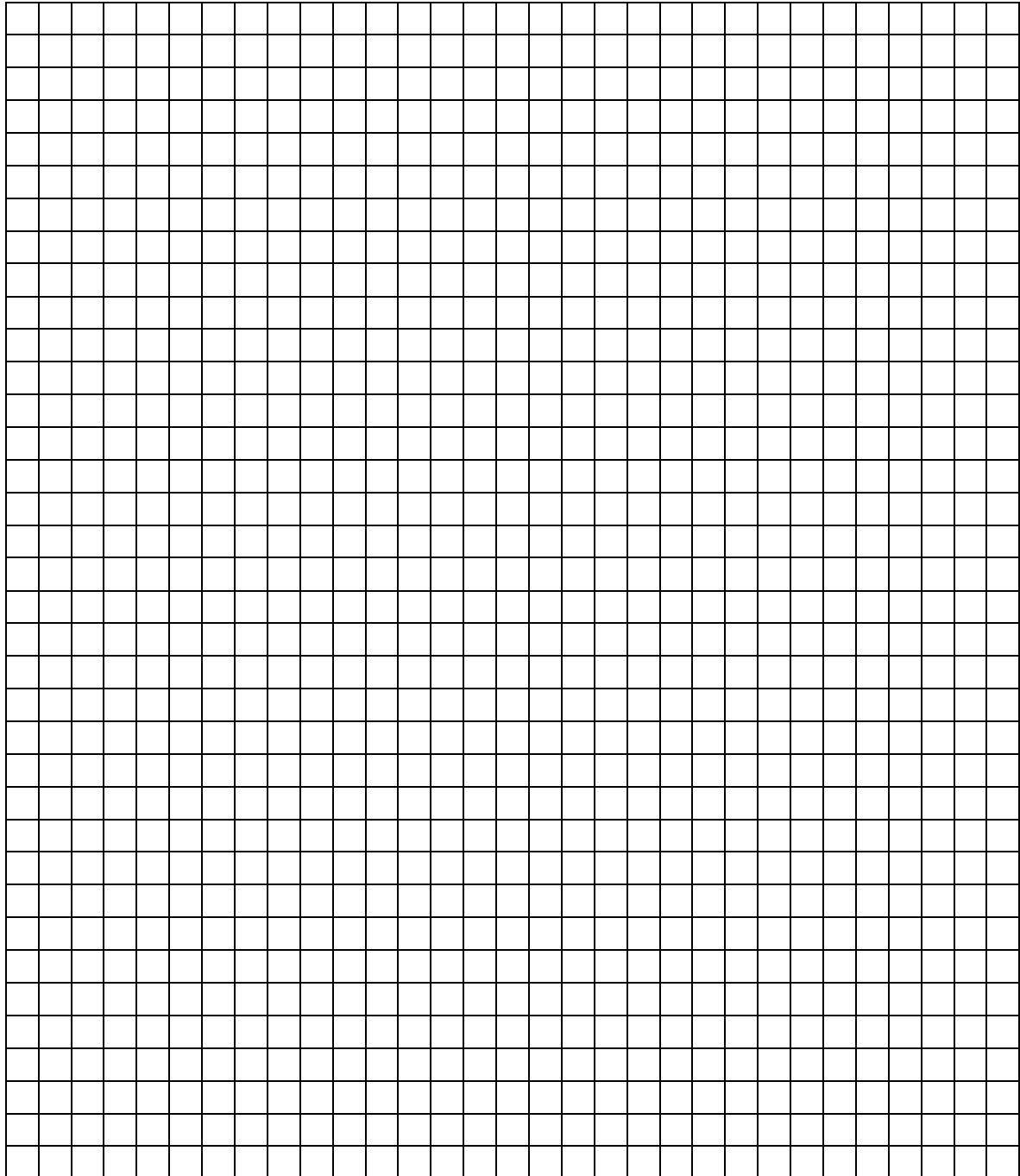


Quantisierung der Leitfähigkeit

Ihr habt soeben das Video zum Versuch gesehen und sollt den Versuch nun selbst durchführen. Der Aufbau dazu ist in Abbildung 1 zu sehen. Auf dieser Seite habt ihr zudem noch Platz, wenn ihr die Rechnung zur Messung von der Tafel mitschreiben wollt.



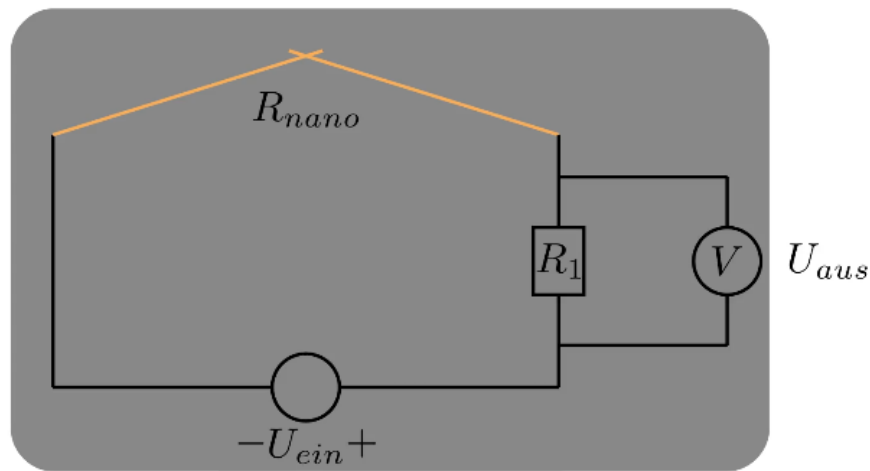


Abbildung 1: Aufbau der Messung

Schließt den Aufbau am Oszilloskop an und legt die Batterien ein. Achtet darauf, dass sich die Golddrähte in der Ruheposition berühren. Wenn dem so ist sollte das Oszilloskop eine positive Spannung anzeigen. Hebt nun das Ende des freien Golddrahtes ganz langsam an, bis der Kontakt abbricht. Wenn ihr langsam genug vorgeht, sollte am Oszilloskop ein Muster erkennbar sein.

Beschreibt, was ihr auf dem Oszilloskop beobachtet und was das für die Leitfähigkeit bedeutet:

Lest die Spannungswerte der Stufen ab und notiert diese. Führt dazu mehrere Messungen durch. Stimmen diese mit dem theoretischen Werten überein?
